

# Glunovo<sup>®</sup>

Real-Time Continuous Glucose Monitoring



## Stručný průvodce pro uživatele Glunovo i3 CGM



MALÝ A LEHKÝ



JEDNODUCHÝ



CHYTRÝ



BEZPEČNÝ

**medatron<sup>®</sup>**



**Technická podpora:**

+ 420 737 664 106

(Po-Pá: 8:00-17:00)

[glunovo@medatron.cz](mailto:glunovo@medatron.cz)



**Infinovo**  
Innovation for Diabetes

## Krok 1: Vyberte místo



Vyberte správné místo pro aplikaci a očistěte ho alkoholovým ubrouskem.

**POZNÁMKA:** Doporučujeme na břiše 5 cm od pupku a nejméně 5 cm od místa vpichu inzulínu nebo na zadní stranu paže.

## Krok 2: Odstraňte pásku




Odlepte krycí pásku ze spodní strany senzoru.

## Krok 3: Přitiskněte aplikátor




Přitiskněte aplikátor pevně na vybrané místo, aby byla náplast přilepena.

## Krok 4: Odjistěte pojistku

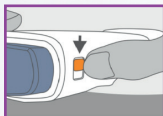

Držte aplikátor a odjistěte pojistku.

## Krok 5: Implantujte senzor

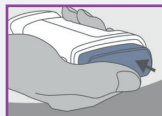

Pro zavedení sondy stiskněte tlačítko aplikátoru. Pak aplikátor odstraňte.


**POZNÁMKA:** Musíte jasně slyšet zvuk cvaknutí pružiny.

## Krok 6: Zkontrolujte náplast



Ujistěte se, že je náplast pevně připevněna.

## Krok 7: Připojte vysílač

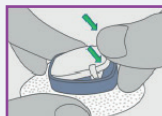

Před použitím otřete spodní část vysílače alkoholovým ubrouskem a nechte uschnout.

Vysílač zacvakněte do základny senzoru. Musíte zřetelně slyšet dvě cvaknutí.

## SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY



**Glunovo**<sup>®</sup>  
Real-Time Continuous Glucose Monitoring



webový portál  
glunovoshare.com  
pro sdílení dat s lékařem

## Krok 8: Registrace


Zaregistrujte si uživatelský účet s osobními informacemi.



## Krok 9: Spojení

Zadejte do aplikace ID a PIN vysílače.

Začněte párování.

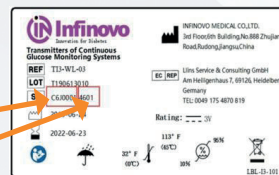

POZNÁMKA: ID naleznete na vysílači a na balení. Rozlišujte malá a velká písmena.

## Krok 10: Začátek snímání



Zadejte ID senzoru (LOT).  
Stiskněte START CGM.



POZNÁMKA: ID naleznete na obalu senzoru a na balení.

## Krok 11: Zahřátí senzoru



Doba aktivace: 190 minut.

## Krok 12: Kalibrace



Po 190 minutách je zahřívání dokončeno.


Zadejte svou první glykémii naměřenou glukometrem, stiskněte KALIBROVAT a začněte 14denní život s Glunovo i3 CGM.

Hodnotu glykémie naměřenou glukometrem zadejte do 3 minut po měření.

Kalibraci provádějte, když je hladina glukózy stabilní.

Je doporučeno provádět kalibraci jednou za 24 hodin pomocí glukometru.

## Krok 13: Zastavení senzoru

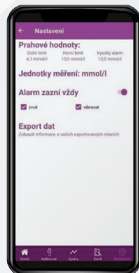

Po 14 dnech se senzor zastaví.

Provedte export dat do složky v telefonu.

V menu aplikace zastavte vysílač.

## Krok 14: Odstranění senzoru



Odstraňte společně najednou vysílač se senzorem.  
Vysílač vyjměte uvolňovačem.

POZNÁMKA: Vysílač uchovává data maximálně 14 dní,  
pokud není odpojen od základny senzoru.  
Po odpojení od základny se vysílač resetuje.